


La OZOMED smartline si distingue per il suo design estremamente compatto e l'eccellente performance. Con una concentrazione di ozono regolabile tra 1 e $\leq 80 \mu\text{g/ml}$, è possibile effettuare tutte le terapie più comuni come infiltrazioni locali di ossigeno/ozono, acqua ozonizzata (con WOG), grande e piccola autoemoterapia, insufflazione rettale e trattamento con sacca.

PUNTI DI FORZA DEL PRODOTTO

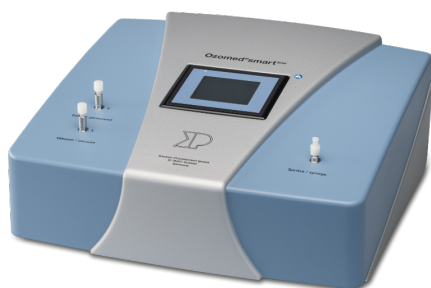

- Facile da usare grazie al touchscreen a colori, con supporto multilingue
- Dispositivo da banco, ideale per ambulatori medici piccoli e medi
- Catalizzatore potente per una distruzione sicura dell'ozono residuo
- Manutenzione ridotta e lunga durata del prodotto
- Sviluppato e prodotto in Germania

Specifiche tecniche del dispositivo OZOMED smartline

Configurazione	Dispositivo da banco
Tecnica operativa	Tecnica d'infusione normobarica
Concentrazione di ozono	da 1 a $80 \mu\text{g/ml}$
Flusso	0,9 l/min
Pressione operativa	1 bar
Pompa per il vuoto	Fino a - 0,7 bar
Trattamento dell'acqua con ozono	Disponibile come opzione
Dimensioni [W x H x D]	42 x 19 x 39 cm
Peso	9,8 kg
Dati elettrici	100 – 240 V AC; 50 – 60 Hz; 1,2 A; Classe di protezione I
Classificazione	Dispositivo medico di classe IIb secondo Direttiva 93/42/CEE
Garanzia	2 anni (in Europa)

Modalità terapeutiche con **OZOMED smartline**

Grande autoemoterapia ●

Piccola autoemoterapia ●

Insufflazione rettale ●

Trattamento con sacca ●

Applicazione di gas
ozono a bassa pressione

Iniezioni di ozono ●

Acqua ozonizzata opzionale



Set per terapia con Ozono

OZONOSAN Set 4 Plus

per la grande autoemoterapia



1 bottiglia sotto vuoto OZONOSAN da 250 ml con sistema a microbolle

12 ml di citrato di sodio come anticoagulante (senza lattice)


1 set da trasfusione con punta in acciaio

1 set da perfusione con ago da 0,8 o 1,1 mm (a scelta)

1 siringa monouso da 50 ml siliconata

1 set di filtro di trasferimento con cannula e filtro (0,2 µm) per l'introduzione dell'ozono

Set Ozonosan per insufflazione rettale con soffiETTO dosatore

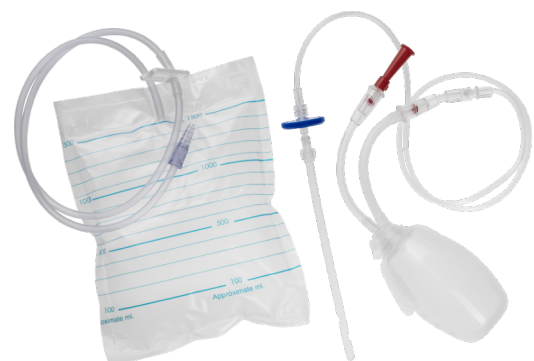

1 soffiETTO dosatore

5 serbatoi per ozono con valvola

50 cateteri monouso speciali 18 Ch

50 linee di infusione da 75 cm

50 filtri batterici

Hänsler Medical GmbH

Nordring 8, 76473 Iffezheim, Germany

+49 (0) 7229 3046 0

@ info@haensler-medical.com

www.haensler-medical.com



Distribuito da: **METI**
devices

Sede Operativa:

Piazza Lavelli de' Capitani 5,

23885 Brivio (LC)

Italy

Tel. +39 039 9710293

Mbl. 3465404019

www.metibiosolutions.com