

Una Terapia **Comprensiva, Conciliante ed Efficace**
Risposte **Sicure a Bisogni Reali e Potenziali altamente Ricettivi**



Scegli il tuo Obiettivo

A woman in a long, light-colored coat walking in a park-like setting with a building in the background.

BENESSERE, SANA
LONGEVITÀ E
BELLEZZA

A man's back with a diagram of the spine overlaid, showing a red area of inflammation or pain in the lower back.

INFIAMMAZIONI,
DOLORI CRONICI E
PATOLOGIE



ENERGIA E VITALITÀ, PIÙ A LUNGO.

Siamo consapevoli che la vita moderna può essere impegnativa e stressante, e vogliamo offrire un'alternativa che non solo ti aiuti a superare le sfide quotidiane, ma anche a raggiungere la massima vitalità e longevità possibile. Siamo qui per aiutarti a migliorare la tua salute e a vivere una vita piena di energia, vitalità e benessere.



ENERGIA E
PERFORMANCE

APPORTO DI
OSSIGENO

AUMENTO DELL'
IMMUNITÀ

DETOX E
RECUPERO

RIVITALIZZAZIONE
TESSUTI

OZONOTERAPIA: LA CURA NATURALE PER IL TUO CORPO

Siamo consapevoli che ogni giorno il corpo è sottoposto a infiammazioni, dolori, traumi oltre che a patologie croniche che creano disagi e non ti permettono di vivere al meglio. In un mondo dove il farmaco è spesso abusato, l'Ozonoterapia ti permetterà di riprendere possesso del tuo corpo e risolvere le sue problematiche in modo naturale.

ERNIE E
PROTRUSIONI

INFIAMMAZIONI
LOCALIZZATE

FIBROMIALGIA E
STANCHEZZA

CERVICALGIE E
SCIATALGIE

ARTRITI E
ARTROSI

LONG
COVID

HERPES SIMPLEX
E ZOSTER

TENDINITI E
GONALGIE

INSUFFICIENZE
VENOSE

ACNE E
DERMATITI



Catalogo Devamed

Linea Ossigeno Ozono Terapia



Dispositivi
medici



CLASSE IIB



Wezono Ozone Tech Advance

Wezono rappresenta la più recente linea di generatori di ozono medicale contraddistinti da alti standard tecnologici in fatto di **affidabilità, innovazione e sicurezza.**



Con Wezono abbiamo pensato ad un dispositivo medico professionale che potesse conferire in un solo elemento tecnologico **robustezza, affidabilità, accuratezza ed estrema versatilità** al fine di permetterne l'utilizzo in vari contesti con la massima efficienza.

Il design ergonomico e l'interfaccia utente semplificata rendono Wezono un dispositivo comodo e vantaggioso.

Catalizzatore integrato (converte ozono in ossigeno)

Canale uscita Ozono

Comandi Touchpad

Controller a sfioramento touch



Innovativo

Wezono garantisce un'accurata ed uniforme concentrazione della miscela O₂/O₃ tramite **sistema di misura ACM** (Algorithm Calculated Measurement) **esente da calibrazione.**

Monitora in *modo attivo e automatico* pressione e temperatura ambientale.

High Voltage Generator™ con un tubo di ozono compatto, governato da un controller elettronico, che produce concentrazioni di gas ozono molto precise e coerenti.



Sicuro

Wezono integra un **sistema di automonitoraggio** reattivo ad unità al di fuori delle specifiche permettendo all'utilizzatore applicazioni **sicure ed affidabili**.

L'emissione dell'ozono viene eseguita da un sistema a *doppia valvola e compensazione automatica della pressione* per **evitare perdite indesiderate** garantendo la sicurezza dell'utente e del paziente.

Due unità interne di distruzione catalitica dell'ozono ciascuna con un circuito indipendente completamente esente da manutenzione.



Efficiente

Wezono **aumenta la stabilità della concentrazione di ozono** fornendo maggiore accuratezza e precisione grazie al monitoraggio del controllo dinamico (DCM) *per un consumo di ossigeno ottimizzato* assicurando contemporaneamente che la miscela di ozono e ossigeno gassosa sia omogenea.




3 Modalità Operative

Wezono è ottimizzato in tre diverse modalità operative: **riempimento siringa, flusso continuo e manuale.**

Ciò consente di eseguire in sicurezza qualsiasi tecnica di somministrazione necessaria alle esigenze cliniche.

Il dispositivo certifica inoltre, a fine di ogni singola operazione, il dettaglio del volume e concentrazione erogata fornendo dati tutelativi per la compliance.

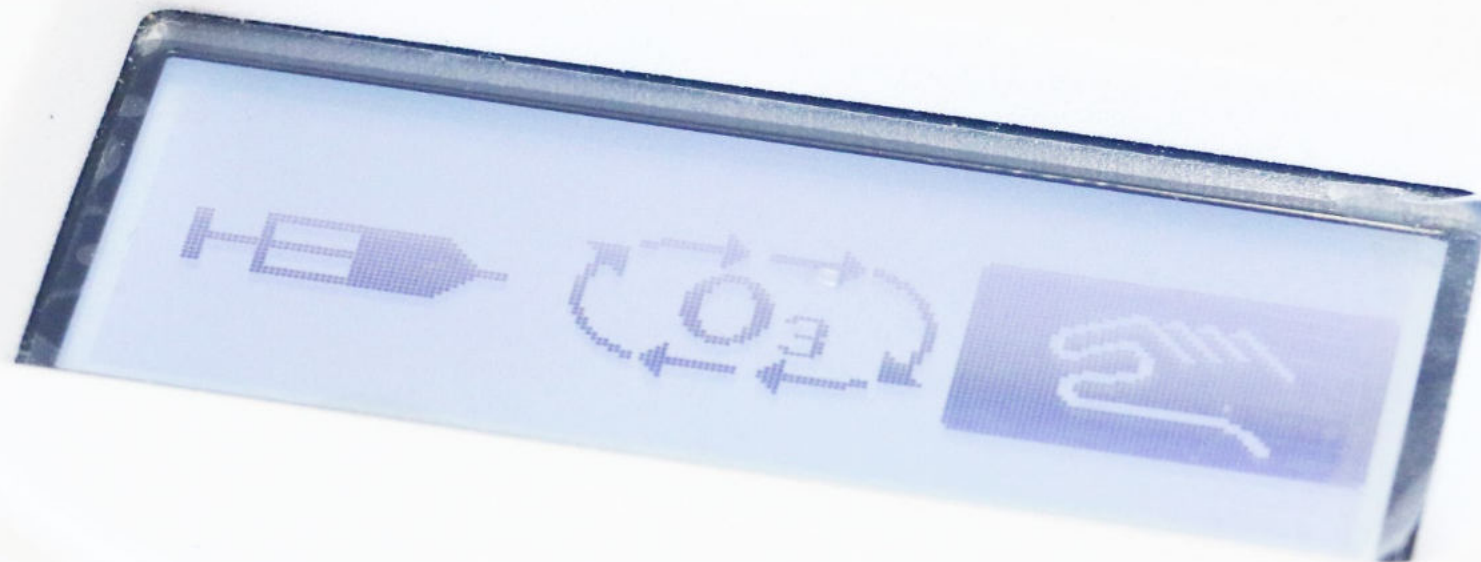

Modalità Siringa Intelligente

Wezono riconosce comodamente in modo **automatico la dimensione della siringa** garantendone il riempimento accurato, veloce e sicuro sulle specifiche impostate.



Impiegabile per uso standardizzato in *Autoemoterapia, Insufflazione rettale / vaginale e Infiltrazione*: nell'articolazione, intramuscolare, sottocutanea.

Blocco automatico al raggiungimento soglia volume siringa



Touch Modalità Siringa



Touch Concentrazione



Erogazione e Riempimento

Modalità Flusso Continuo

Nella modalità continua, **con esclusiva regolazione del flusso indipendente**, Wezono eroga in modo automatico, uniforme e costante la miscela di O₂/O₃ con timer in tempo reale certificando volume e concentrazioni erogate.



Impiegabile per uso standardizzato in *Soluzione Salina Ozonizzata, Insufflazione rettale e vaginale, Terapie con sacca / Vulnologia / Iperbarica, Ozonizzazione liquidi/oli*



1. Touch Concentrazione



2. Touch Regolazione Portata



3. Touch Regolazione tempo

Gestione Micro Modalità Manuale


Nella modalità manuale, Wezono permette di programmare **concentrazione e flusso variabile**: l'operatore sceglie quanto riempire una siringa o quanto ozono erogare con report e indici in tempo reale sul display.

Il tutto tramite semplice azione di tocco e rilascio sul touchbar.



IDONEA

a tutte le tecniche
di somministrazione

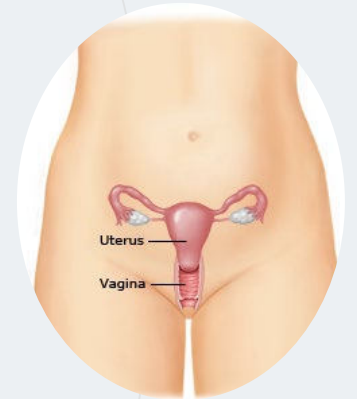

distribuito da

METI
devices

Bonus

OMAGGIO di consumabili



25 Kit per fisiologica ozonizzata

Meti Devices S.r.l.

Piazzale Luigi Cadorna 13, 20123, Milano, Italy

+39 039 9710293 Mbl. 3454681809

info@metidevices.com

www.metibiosolutions.com